

30 Minuten Behandlung
20.000
 SIT-UPS

16% ø Zunahme der Muskelmasse
 ø Reduktion der Fettmasse **19%**
 Behandlungsdauer von 30 Minuten



nicht invasiv



keine Strahlung



nicht thermisch



selektives Body-Sculpting



nicht-invasive Gesichtsbehandlung



keine Ausfallzeit



schmerzfrei



bedienerunabhängig



kein Verbrauchsmaterial



ULTRAFORM
 Bitte schön.



EEVA Ästhetik GmbH
 Münzgrabenstraße 60
 8010 Graz
 T: +43 316 23 16 026
 www.eeva.vision | office@eeva-awt.com

Ihre Ansprechpartner:
 René Heinrich: +43 664 22 29 286
 Werner Huber: +43 664 30 41 442
 Michael Altenburger: +43 664 87 48 483

RF-SCULPTING

Zielgerichtete **Fettreduktion** in Verbindung mit hocheffizientem **Muskelaufbau** in einem Behandlungszyklus.




ULTRAFORM
 Bitte schön.

DIE WIRKUNGSWEISE

Die ästhetische Medizin bietet mittlerweile viele Verfahren an, um den Körper zu formen und zu definieren. Fast alle Geräte oder Behandlungen zielen darauf ab, Fett zu reduzieren und die Haut zu straffen.

Der Muskelanteil unseres Körpers beträgt ca. 35% und die meisten Geräte oder Behandlungen auf dem Markt konzentrieren sich nur auf die Fettreduzierung, aber nicht auf die Muskulatur. Mit dem neuen Ultraform RF-SCULPTING gibt es ein Verfahren, das sowohl die Muskulatur aufbaut als auch gleichzeitig Fett reduziert. Mit dieser Technologie können Sie verschiedene Areale am Körper behandeln, wie z.B. Bauch, Oberschenkel, Po und Oberarme.

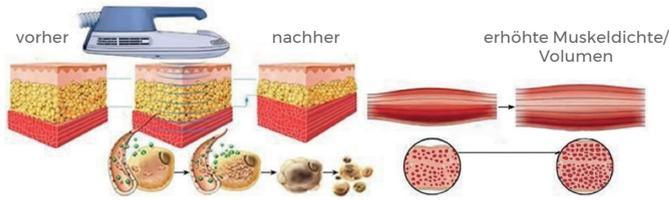

Ultraform RF-SCULPTING verwendet die nicht-invasive und schmerzlose HIFEM-Technologie (High-Intensity Focused Electromagnetic Field) + Focused Monopole Radiofrequenz. Die elektromagnetische Energie dringt bis zu einer Tiefe von 8cm in die Muskulatur ein, um die Muskeln zu intensiver Aktivität anzuregen, den sogenannten supermaximalen Kontraktionen.

Während einer Behandlung initiiert das Gerät bis zu 20.000 solcher Kontraktionen innerhalb einer halben Stunde. Es findet eine kontinuierliche Ausdehnung und Kontraktion der Muskeln statt, um die Myofibrillen (Muskelvergrößerung) anzuregen. Die Muskeldichte wird somit um ein Vielfaches gesteigert.

Die zuschaltbare Radiofrequenz erwärmt die Fettschicht auf 43 bis 45 Grad und beschleunigt die Zersetzung und Ablation von Fettzellen.


DIE ANWENDUNG

Das Ultraform RF-SCULPTING ist das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung gemeinsam mit zahlreichen Partnern. Eine problemlose, nahezu schmerzfreie Anwendung ohne Ausfallzeiten für den Patienten war immer zentraler Fokus.


Sie müssen nur die zu behandelnden Areale frei zugänglich halten und können ansonsten Ihre Alltagskleidung tragen. Nach der üblichen Anamnese durch unsere Mitarbeiter werden die Applikatoren an den gemeinsam festgelegten Arealen mithilfe von Gurtbändern fixiert - und schon kann es losgehen. Neben einem leichten Kribbeln verspüren die meisten Patienten während der Behandlung nichts.

Nach der rd. 30-minütigen Behandlung können Sie sofort wieder Ihrem Alltag nachgehen und müssen keine Ruhezeiten oder Ähnliches beachten.


Häufige Anwendungsformen

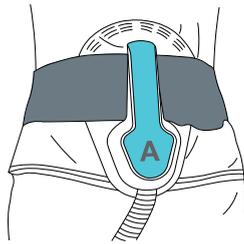


Bauchbehandlung mit einem großen Behandlungskopf

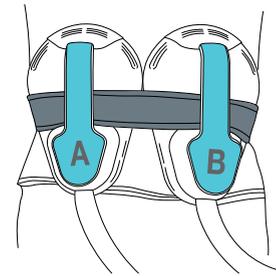

Bauchbehandlung mit zwei großen Behandlungsköpfen

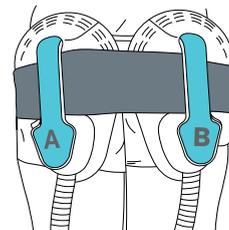

Gesäßbehandlung mit zwei großen Behandlungsköpfen

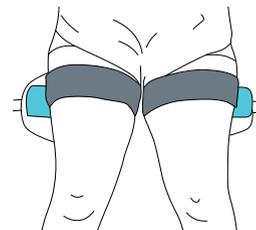

Behandlung der hinteren Oberschenkel mit kleinen Behandlungsköpfen

DIE ERGEBNISSE

Die Behandlungsprogramme kombinieren in unterschiedlicher Gewichtung Muskelaufbau und Lipolyse. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen werden 2-3 Behandlungen pro Woche empfohlen.

Im Allgemeinen führt ein Zyklus von 6-8 Behandlungen zu einem sehr guten Ergebnis hinsichtlich des Muskelaufbaus bzw. der Lipolyse. Hier ist meist sofort, bzw. kurzfristig bereits eine deutliche Veränderung sichtbar.

Rund 8 Wochen nach der letzten Behandlung ist dann das finale Ergebnis meist vollständig ausgebildet.



Vollständig ausgebildetes Ergebnis nach 8 Behandlungen bei einer 35-jährigen Frau.



Vollständig ausgebildetes Ergebnis nach 8 Behandlungen bei einem 46-jährigen Mann.